



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

Die Lösung für eine effektive Verwaltung der Medikamente

Die Medikamentenverabreichungswagen der AccessRx-Serie bieten Lösungen für einen sicheren und effizienten Transport sowie für die Verabreichung von Medikamenten am Patientenbett.



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
Maximale Behälteranzahl	12	24	12
Konfigurierbare Schublade	✓	✓	✓
Auswechselbare Medikamentenkassetten		✓	
Individuell sperrende Patientenschubladen	✓		✓
Software-Links zum HIS	✓		
Schubladenoption für kontrollierte Substanzen	✓	✓	✓
Zuweisung von Patientenbehältern	Automatisch	Manuell	Manuell
Antimikrobielles Wagenmaterial	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™ *enthält keine Kassette	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™

VORTEILE



Einzelne Schließbehälter und Schubladen



Unterstützt Echtzeit BCMA



Unterstützt Fill Workflow von zentralisierter oder dezentralisierter Medikation



Auswechselbare Medikamentenkassetten



Sichern und Verfolgen der Patientenmedikation



Fortschrittliche Li-Nano-Technologie mit 5 Jahre Garantie

Optimierung der Verabreichung der Medikamente - von der Apotheke bis zum Patientenbett.

AccessRx MD™




Arzneimittelsicherheit am Patientenbett

- Individuell verriegelbare, patientenspezifische Schubladen können durch Scannen des Patienten-ID-Barcodes zugänglich gemacht werden
- Echtzeit-Verabreichung von Medikamenten am Patientenbett, Barcode-Patientenidentifizierung und direkter eMAR-API-Zugriff rationalisiert den BCMA-Prozess, reduziert Redundanzen und erhöht die Genauigkeit
- Patientenschubladen werden automatisch über die ADT-Schnittstelle (Aufnahme/Entladung/Transfer) zugewiesen, wodurch die zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Beschriftung der Schubladen entfällt
- Nutzt die Datenbank des Krankenhauses für eine konsistente Benutzerauthentifizierung
- Konfigurierbare Schubladen-Anzeigefelder ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf

- Sichert und verfolgt patientenspezifische Medikamente für bis zu 12 Patienten in einzeln abschließbaren Schubladen
- ADT- und Patientenbestellungen werden über ein drahtloses Netzwerk an den Wagen übertragen, um eine schnellere Medikamentenlieferung zu ermöglichen
- Reduzieren Sie die Wege und die Zeit, die am automatisierten Ausgabeschrank verbracht wird

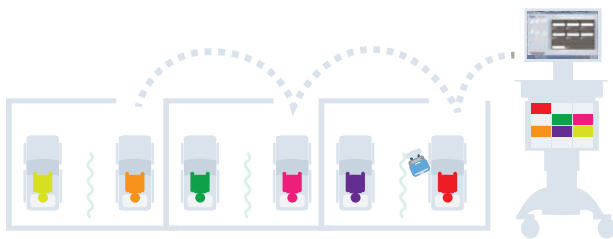



Mehr Kontrolle und Flexibilität für Apotheker durch einer Vielzahl von Modellen

- Die browserbasierte AccessManager™ -Konsole bietet Zugriff auf Berichte, ermöglicht gleichzeitig die kompatible Benutzerverwaltung, überwacht die Arbeitsstationen und Systemkonfigurationen.
- Konfigurierbare, zeitbasierte Zugriffskontrollen verringern das Risiko einer Medikamentenverabreichung zu einem falschen Zeitpunkt und unterstützen bei der Abstimmung von nicht verwendeten Medikamenten
- Schnittstelle für optionale Arzneimittelverordnungen – Rx MD kann als Ausfüller von Medikamentenverordnungen für Patienten fungieren und überprüft, ob eine Verordnung verabreicht wurde
- Automatische E-Mail-Benachrichtigungen für verlegte und entlassene Patienten



Skalierbare & zentralisierte Software-Architektur und Integration

- Skalierbare Architektur - Fähigkeit zur Skalierung von einer Zwei-Betten-Klinik bis hin zu einem Gesundheitssystem mit mehreren Einrichtungen
- Es besteht die Möglichkeit, Zugangsrechte zum Gesundheitssystem einzurichten, z.B. nach Abteilungen
- Unternehmensberichte verfügbar
- HL7-kompatibel, ADT-Schnittstelle (demographische Patientendaten) und RDE-Schnittstelle (Apothekenbestellungen)
- Konfigurierbare Schnittstellen kommunizieren einfach mit dem HIS
- Projektmanagement, Installation und Schulung durch das geschulte Serviceteam von TouchPoint Medical

Konfigurieren Sie Ihr System so, dass es Ihren Medikamenten- und Versorgungsanforderungen entspricht.



Abmessungen
Breite
Höhe
Tiefe
Volumen

	102 mm (4in) Spezifikationen der Schublade	152 mm (6in) Spezifikationen der Schublade	Kontrollierte Substanz Spezifikationen für Schubladen in voller Breite
Breite	91,4 mm (3.6in)	142,2 mm (5.6in)	271,8 mm (10.7in)
Höhe	238,8 mm (9.4in)	238,8 mm (9.4in)	228,6 mm (9in)
Tiefe	55,9 mm (2.2in)	55,9 mm (2.2in)	50,8 mm (2in)
Volumen	1213 cm ³ (74in ³)	1885 cm ³ (115in ³)	3195 cm ³ (195in ³)

Mit Ihrer zentralisierten
Medikamentenverteilung steigern
Sie Effizienz und Sicherheit.

AccessRx Exchange™



AccessRx Exchange™ Arbeitsplatz auf Rädern

- Einfaches Auffüllung der Bestände, wo immer Sie diese benötigen. Kann in der Apotheke erfolgen oder direkt am Wagen
- Optionen für Schlüsselschloss oder eLock-Sicherheit
- Rüsten Sie Ihre bestehende AccessPoint™ Arbeitsstation vor Ort einfach mit dem Wechselkassetten-system nach
- Kann zu motorisierten oder nicht motorisierten Wagen hinzugefügt werden
- Funktioniert sowohl mit manuellen als auch mit elektrischer Höhenverstellung



Auswechselbare Kassetten

- Einfaches und direktes Auffüllen der Bestände an der mobilen Arbeitsstation oder der Wandhalterung
- Erhältlich in zwei, drei oder vier Größen und mehreren Behältergrößen, sowie Optionen für Versorgungsschubladen
- Tragfähigkeit bis zu 2,2 kg (5,5 lbs) pro Ebene
- Kompakte Stellfläche für 600 mm x 400 mm Wagen oder (ISO 3394 modulare Systeme) Schrank



Transferwagen

- Alle Transferwagen sind mit einer abschließbaren Rolltür ausgestattet
- Alle Transferwagen enthalten einen verlängerten Griff
- Sperroptionen umfassen Schlüsselschloss- oder E-Schloss-Systeme
- Einfache Breite, Option für Frontbeladung
- Doppelte Breite, Option für seitliche Beladung



Entwickelt zur Unterstützung Ihrer Speicher- und Workflow-Präferenzen

- Mit dem Kassetten-Wandmontagesatz werden die Arbeitsabläufe und die Lagerung auf der Station unterstützt
- Optionen für Schlüsselschloss- oder eLock-Sicherheitssysteme



Mit dem System AccessRx Exchange™ können Sie Ihre bestehende AccessPoint™ Gerätewagen leicht anpassen.

- Nachrüstung Ihrer bestehenden Arbeitsstationen vor Ort mit minimalen Ausfallzeiten
- Einfache Nachrüstung möglich
- Funktioniert sowohl mit manuellen als auch mit elektrischer Höhenverstellung



Flexible Sperr Optionen

Druckknopf-eLock-Funktionen:

- 20 Codes pro Schloss: 19 Benutzercodes und ein Supervisor-Code; die Codelänge beträgt 4-8 Stellen
- 7500 Zyklen (verlängerte Batterielebensdauer)
- ADA-konform
- Batterieanzeige
- Das Batteriefach ist von der Außenseite der Kassette leicht zugänglich

Merkmale der Schlüsselsperre:

- Herausnehmbarer Schlosskern
- Einzigartige Schloss-/Schlüsselserie für Kassettenträger, Kassetten und Schublade für kontrollierte Substanzen für erhöhte Sicherheit

Lagern und sichern Sie Ihre
Medikamente.

AccessRx Secure™








Sichern Sie Ihre Medikamente während Ihres gesamten Arbeitsablaufes

- Schubladen mit Einzelverriegelung
- Benutzerfreundliche Software
- Lagerkonfigurationen zur Sicherung einer Vielzahl von Medikamenten und gefährlichen Substanzen
- Schubladen aus grau getöntem Polycarbonat 4" & 6"
- Schubladen mit Aluminiumschloss
- Konfigurierbare Schubladen-Anzeigefelder ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche
- Fügen Sie AccessRx MD™ Software-Optionen zu den bestehenden AccessRx Secure™ wägen hinzu, um eine kundenspezifische Lösung zu erhalten


Konfigurieren Sie Ihr System so, dass es Ihren Medikamenten- und Versorgungsanforderungen entspricht.

Mit einem breiten Angebot an Größen und Verriegelungsoptionen können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Medikamente und Vorräte sicher und bedarfsgerecht aufbewahrt werden.



Optionen für Vorratsbehälter und Schubladen

					
Verriegelungsoption	eLock	eLock	Schlüsselsperre	eLock oder Schlüsselsperre	eLock oder Schlüsselsperre
Kapazität	6 pro Ebene	4 pro Ebene	1 pro Ebene	1 pro 2 Ebene	2 pro 2 Ebene
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	80mm (3,2in) 75mm (3in) 338mm (13,3in)	120mm (3,2in) 75mm (3in) 338mm (13,3in)	480mm (18,9in) 75mm (3in) 338mm (13,3in)	80mm (3,2in) 75mm (3in) 338mm (13,3in)	80mm (3,2in) 75mm (3in) 338mm (13,3in)

Optionen für Wechselkassetten

	 2-stufig	 3-stufig	 4-stufig
Sperr-option	Schlüssel oder eLock	Schlüssel oder eLock	Schlüssel oder eLock
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	595mm (24,4in) 244mm (9,6in) 395mm (15,6in)	595mm (24,4in) 393mm (13,4in) 395mm (15,6in)	595mm (24,4in) 454mm (17,9in) 395mm (15,6in)

Abmessungen des Transferwagens

	 Einfache Breite-Übergabewagen	 Doppelte Breite-Übergabewagen
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	710mm (28in) 1452mm (57,2in) 591mm (23,3in)	1020mm (40,2in) 1464mm (57,6in) 791mm (31,1in)

Zubehörteile

	 Identifizierung-Etiketten-Kits	 Teiler-Kits
	Klare, aufschnappbare Etikettenabdeckungen machen das Wechseln von Kennzeichnungsetiketten schnell und einfach	Die Behälter bieten Platz für bis zu 11 Teiler

 Für weitere Optionen wenden Sie sich an Ihren TouchPoint Medical Ansprechpartner um Zubehör speziell für Ihre Point-of-Care-Anwendung zu besprechen. Besuchen Sie touchpointmed.com/contact, um mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort in Kontakt zu treten.

20200518-BR-MedicationDeliveryCarts-DE