



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

약품 관리에 있어서 인가된 관계자에 한해 공유를 지원 경로 지원

AccessRx 시리즈 약물 투여 카트는 환자의 병상 옆에서 약물을 안전하고 효율적으로 운반 및 투여할 수 있는 솔루션을 제공합니다.



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
최대 보관함 수	12	24	12
가변식 서랍 옵션	✓	✓	✓
교환식 약물 카세트		✓	
개별 잠금식 환자처방별 서랍	✓		✓
HIS에 대한 소프트웨어 링크	✓		
마약류 지정 서랍 옵션	✓	✓	✓
투약 환자별 보관함 지정	자동	수동	수동
항균제가 첨가된 카트 표면 처리	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™ <i>*카세트는 포함되지 않습니다.</i>	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™

주요 이점



개별 잠금식 보관함 및 서랍



실시간 BCMA 지원



중양 집중식 또는 분산식 약물 보충 워크플로우 지원



교환식 약물 카세트



환자 약물 보안 및 추적



5년 보증의 고급 Li-Nano 기술

약국에서 환자 병상 사이에서 인가된 관리에
따른 약품 공급을 지원 합니다.

AccessRx MD™




병상 옆에서 약물 보안 및 가시성

- 환자 ID 바코드를 스캔하여 개별 잠금식, 환자 별 서랍에 접근 가능
- 실시간 병상 약물 관리, 바코드 환자 식별 및 직접 eMAR API 액세스를 통해 BCMA 프로세스를 간소화하고 중복 투여를 줄이고, 정확성 향상
- ADT (Admission/Discharge/Transfer) 인터페이스를 사용하여 환자 서랍이 자동으로 할당되므로 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 서랍 라벨링이 필요 없음
- 일관된 사용자 인증을 위해 병원의 Active Directory 활용
- 가변식 서랍 디스플레이 필드를 통해 사용자 인터페이스를 맞춤형 설계 가능

워크플로우 간소화

- 개별 잠금식 서랍에서 최대 12명의 환자에 대한 환자 별 약물을 보관 및 추적함으로써 ADC에서 소요되는 이동 및 시간 감소
- 신속한 약물 투여를 촉진하기 위해 무선 네트워크를 통해 카트로 전송되는 ADT 및 환자 주문
- 자동 조제 캐비닛에서 소요되는 이동 및 시간 감소

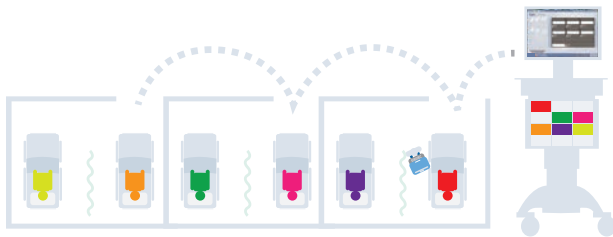



다양한 약국 공급 유형에 따른 약사를 위한 다양한 제어 및 유연성 제공

- Active Directory 호환 사용자 관리, 처방 관리 및 시스템 구성을 허용하면서 보고서에 대한 액세스를 제공하는 브라우저 기반 AccessManager™ 콘솔
- 가변식 시간 기반 액세스 제어를 통해 잘못된 시간에 약물이 투여되는 투여의 위험을 줄이고 미사용 약물을 약국에서 관리할 수 있도록 지원
- 선택형 약품 주문 인터페이스 - RxMD는 환자 약품 주문 필터의 역할을 하며 주문이 처리되었는지 확인 가능
- 이송 및 퇴원 환자에 대한 보안 약국 이메일 알림 메시지



확장 가능하고 집중화된 소프트웨어 아키텍처 및 통합

- 다중 조직 확장형 아키텍처 - 2 병상 클리닉에서 다중 시설 의료 시스템으로 확장 가능
- 부서별 권한과 같이 의료 시스템 액세스 권한을 설정하는 기능
- 기업 보고 가능
- 엔터프라이즈 다중 시설 배포
- HL7 호환, ADT 인터페이스 (환자 인구 통계) 및 RDE 인터페이스 (약국 승인된 주문)
- 가변식 인터페이스 엔진으로 HIS와 간편하게 통신
- TouchPoint Medical의 전문 서비스 팀의 프로젝트 관리, 설치 및 교육

약물 및 공급 요건을 충족하는 시스템을 구성.

	102mm(4인치) 서랍 사양	152mm(6인치) 서랍 사양	규제 약물 전폭 서랍 사양
			
			
치수 폭 높이 깊이 체적	91.4mm(3.6인치) 238.8mm(9.4인치) 55.9mm(2.2인치) 1213cm ³ (74in ³)	142.2mm(5.6인치) 238.8mm(9.4인치) 55.9mm(2.2인치) 1885cm ³ (115in ³)	271.8mm(10.7인치) 228.6mm(9인치) 50.8mm(2인치) 3195cm ³ (195in ³)

중앙 집중식 약물 조제로 효율성 및 보안 강화

AccessRx Exchange™



바퀴형 AccessRx Exchange™ 워크스테이션

- 필요할 때마다 언제든지 간편하게 재입고하십시오. 약국에 쉽게 보충할 수 있으며 카트에서 직접 또는 교환 가능합니다.
- 키 잠금장치 또는 eLock 보안 옵션
- 카세트 교환형 시스템을 사용해서 현장에서 기존 AccessPoint™ 워크스테이션을 간편하게 개조
- 전동식 또는 비전동식 카트에 추가 가능
- 수동 및 전기 리프트 카트 모두에서 작동



교환식 카세트

- 모바일 워크스테이션 또는 월 마운트에서 간편하게 직접 재입고
- 2, 3 또는 4층 크기 및 다양한 보관함 크기와 공급 서랍 옵션으로 제공
- 층당 최대 2.2kg(5.5lbs)의 적재 등급
- 600mm x 400mm 카트 또는 (ISO 3394 모듈식 시스템) 캐비닛에 맞는 컴팩트 한 저장공간



운반 카트

- 모든 운반 카트에는 잠금식 탬버 도어가 포함됨
- 모든 운반 카트에는 확장 핸들이 포함됨
- 잠금장치 옵션에는 키 잠금장치 또는 eLock이 포함됨
- 단일 쪽, 프론트 로딩 옵션
- 이중 쪽, 사이드 로딩 옵션



사용자의 보관 및 워크플로우 환경 설정을 지원하도록 설계됨

- 카세트 월 마운팅 키트로 실내 약물 스테이션 워크플로우 및 보관 지원
- 키 잠금장치 또는 eLock 보안 옵션



AccessRx Exchange™ 시스템을 사용해서 기존 AccessPoint™ 제품군을 간편하게 사용

- 기존 워크스테이션을 현장에서 개량함으로써 가동 중지 시간 최소화
- 전동식 또는 비전동식 카트에 추가 가능
- 수동 및 전기 리프트 카트 모두에서 작동



유연한 잠금장치 옵션

푸시 버튼 eLock 기능:

- 잠금장치 당 20개 코드: 19개 사용자 코드 및 1개의 관리자 코드, 코드 길이는 4~8자리
- 7500회 사이클 (확장 배터리 수명)
- ADA 준수
- 배터리 부족 표시등
- 카세트 외부에서 배터리 함에 쉽게 접근 가능

키 잠금장치 기능:

- 탈착식 잠금장치 코어
- 보안이 강화된 카세트 캐리어, 카세트 및 규제 약물 서랍용 고유한 잠금장치/키 시리즈
- 대형형 키잉이 있는 측면 서터 잠금장치

약물을 투여 환자 주변에서 보관 및 안전성 확보

AccessRx Secure™



워크플로우 전반에 걸쳐 약품의 안전성 확보

- 개별 잠금식 서랍
- 사용하기 쉬운 소프트웨어
- 다양한 약물 및 규제 약물의 보호를 위한 보관 구성
- 스모크 폴리카보네이트 4" 및 6" 서랍
- 알루미늄 잠금 보관 및 규제 약물 서랍
- 가변식 서랍 디스플레이 필드를 통해 사용자 인터페이스를 맞춤형 설계 가능
- 확장형 맞춤형 솔루션을 위해 AccessRx MDTM 소프트웨어 옵션을 기존 AccessRx Secure™ 카트에 추가




약물 및 공급 요건을 충족하도록 시스템을 구성 할수 있습니다.

다양한 크기와 잠금 옵션을 통해 귀하의 필요에 맞도록 약물 및 용품이 안전하게 보관됩니다.

공급함 및 서랍 옵션

					
잠금 옵션	eLock	eLock	키 잠금장치	eLock 또는 키 잠금장치	eLock 또는 키 잠금장치
용량	총 당 6개	총 당 4개	총 당 1개	2층 당 1개	2층 당 2개
치수 폭 높이 깊이	80mm(3.2인치) 75mm(3인치) 338mm(13.3인치)	120mm(3.2인치) 75mm(3인치) 338mm(13.3인치)	480mm(18.9인치) 75mm(3인치) 338mm(13.3인치)	80mm(3.2인치) 75mm(3인치) 338mm(13.3인치)	80mm(3.2인치) 75mm(3인치) 338mm(13.3인치)

교환 카세트 옵션


			
	2층	3층	4층
잠금 옵션	키 또는 eLock	키 또는 eLock	키 또는 eLock
치수 폭 높이 깊이	595mm(24.4인치) 244mm(9.6인치) 395mm(15.6인치)	595mm(24.4인치) 393mm(13.4인치) 395mm(15.6인치)	595mm(24.4인치) 454mm(17.9인치) 395mm(15.6인치)

운반 카트 치수

		
	단일 폭 운반 카트	이중 폭 운반 카트
치수 폭 높이 깊이	710mm(28인치) 1452mm(57.2인치) 591mm(23.3인치)	1020mm(40.2인치) 1464mm(57.6인치) 791mm(31.1인치)

보관함 액세서리

	
식별 라벨 키트	디바이더 키트
투명 스냅온 라벨 커버로 식별 라벨을 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다.	보관함에 각각 최대 11개의 디바이더 사용

 현장 진단 애플리케이션의 추가 액세서리에 대해 자세히 알아보고 상의하려면 TouchPoint Medical 담당자에게 문의하십시오. 웹 사이트 touchpointmed.com/contact를 방문해서 현지 담당자와 연락하십시오.