



AccessRx MD™





AccessRx Secure™

## Contribuiamo a chiudere il ciclo della somministrazione di farmaci.

La serie di carrelli per la consegna di farmaci AccessRx fornisce soluzioni per trasportare e somministrare i farmaci in modo più sicuro ed efficiente al posto letto del paziente.



	AccessRx MD™	AccessRx Secure™
Numero massimo di contenitori	12	12
Opzioni del cassetto configurabili	✓	✓
Contenitori per farmaci intercambiabili		
Cassetti paziente a chiusura individuale	✓	✓
Collegamenti software all'HIS	✓	
Opzioni del cassetto di sostanze controllate	✓	✓
Assegnazione del contenitore paziente	Automatica	Manuale
Materiale del carrello con infusione antimicrobica	✓ 	✓ 

**PRINCIPALI VANTAGGI**



Contenitori e cassette a chiusura individuale



Supporto del BCMA in tempo reale



Supporto del flusso di lavoro di evasione dei farmaci centralizzato o decentralizzato



Contenitori per farmaci intercambiabili



Protezione e monitoraggio dei farmaci per i pazienti



Tecnologia Li-Nano avanzata con 5 anni di garanzia


## Chiusura del ciclo di consegna dei farmaci tra la farmacia e il letto del paziente.

AccessRx MD™



### Sicurezza e visibilità dei farmaci al posto letto

- È possibile accedere ai cassetti a chiusura individuale specifici per paziente tramite la scansione del codice a barre dell'ID paziente
- La somministrazione in tempo reale di farmaci al posto letto, l'identificazione del paziente con codice a barre e l'accesso diretto all'API eMAR semplificano il processo BCMA, riducono la ridondanza e aumentano la precisione
- Cassetti paziente assegnati automaticamente tramite l'interfaccia ADT (Ammissione/Dimissione/Trasferimento) ed eliminazione dell'etichettatura manuale dei cassetti, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori
- Utilizza l'Active Directory dell'ospedale per un'autenticazione coerente dell'utente
- I campi di visualizzazione configurabili del cassetto consentono la personalizzazione dell'interfaccia utente

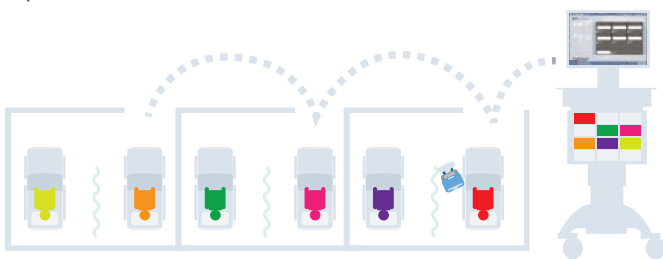

### Ottimizza il tuo flusso di lavoro

- Protegge e monitora i farmaci specifici per i pazienti per un massimo di 12 pazienti in cassetti a chiusura individuale, riducendo gli spostamenti e il tempo trascorso presso l'ADC
- ADT e ordini dei pazienti trasmessi al carrello tramite rete wireless per agevolare una più rapida consegna dei farmaci
- Riduzione degli spostamenti e del tempo trascorso presso l'armadio di distribuzione automatizzato

### Maggiore controllo e flessibilità per i farmacisti attraverso un'ampia gamma di modelli di distribuzione delle farmacie

- La console AccessManager™ basata su browser fornisce l'accesso ai rapporti consentendo la gestione degli utenti, la gestione dell'apparecchiatura e la configurazione del sistema compatibili con Active Directory
- I controlli degli accessi configurabili basati sul tempo riducono il rischio di somministrazione di farmaci in un momento errato e agevolano la riconciliazione in farmacia per i farmaci non utilizzati
- Interfaccia degli ordini di farmaci opzionali: Rx MD può fungere da compilatore di ordini di farmaci per il paziente e verificare che un ordine sia stato somministrato.
- Avvisi alla farmacia tramite e-mail sicure per pazienti trasferiti e dimessi

### Architettura e integrazione software scalabili e centralizzate

- Multi-Org: architettura scalabile che offre la possibilità di passare da una camera ospedaliera con due letti a un sistema sanitario multi-struttura
- Capacità di impostare i diritti di accesso al sistema sanitario, ad esempio per reparto
- Rapporti aziendali disponibili
- Implementazione multi-struttura aziendale
- Conformità HL7, interfaccia ADT (dati demografici paziente) e interfaccia RDE (ordini approvati dalla farmacia)
- Il motore di interfaccia configurabile comunica facilmente con l'HIS
- Gestione dei progetti, installazione e formazione da parte del team di servizi professionali di TouchPoint Medical

Conserva e mantieni i farmaci al sicuro presso il posto letto.

AccessRx Secure™



### Proteggi i farmaci durante il tuo flusso di lavoro

- Cassetti a chiusura individuale
- Software facile da utilizzare
- Configurazioni di conservazione per proteggere una varietà di farmaci e sostanze controllate
- Cassetti in policarbonato opaco da 4" e 6"
- Stoccaggio con chiusura in alluminio e cassette per sostanze controllate
- I campi di visualizzazione configurabili del cassetto consentono la personalizzazione dell'interfaccia utente
- Aggiungi le opzioni del software AccessRx MD™ ai carrelli AccessRx Secure™ esistenti per una soluzione scalabile e personalizzata



### Configura il tuo sistema per soddisfare i requisiti in termini di farmaci e forniture.



**Dimensioni**  
Larghezza  
Altezza  
Profondità  
Volume

Specifiche cassetto da 102 mm (4 in)	Specifiche cassetto da 152 mm (6 in)	Specifiche del cassetto di sostanze controllate a piena larghezza
91,4 mm (3,6 in)	142,2 mm (5,6 in)	271,8 mm (10,7 in)
238,8 mm (9,4 in)	238,8 mm (9,4 in)	228,6 mm (9 in)
55,9 mm (2,2 in)	55,9 mm (2,2 in)	50,8 mm (2 in)
1213 cm <sup>3</sup> (74 in <sup>3</sup> )	1885 cm <sup>3</sup> (115 in <sup>3</sup> )	3195 cm <sup>3</sup> (195 in <sup>3</sup> )



Rivolgiti al tuo rappresentante TouchPoint Medical per saperne di più e discutere di ulteriori accessori specifici per la tua applicazione point-of-care. Visita [touchpointmed.com/contact](http://touchpointmed.com/contact) per metterti in contatto con il rappresentante di zona.

20210823-BR-MedicationDeliveryCarts-IT