



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

Bouclons la boucle du circuit du médicament !

Les chariots de distribution de médicaments AccessRx offre un large éventail de solutions pour transporter et administrer les médicaments de manière plus sûre et plus efficace au chevet des patients.

**POSTES DE
DISTRIBUTION
DE MÉDICAMENTS**



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
Nombre maximum de bacs	12	24	12
Tiroirs configurables	✓	✓	✓
Cassettes de médicaments interchangeables		✓	
Tiroirs patient à verrouillage individuel	✓		✓
Liens logiciels vers le SIH	✓		
Tiroirs pour substances contrôlées en option	✓	✓	✓
Affectation du bac patient	Automatique	Manuel	Manuel
Matériaux du chariot infusé antimicrobien	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™ <i>*cassette non comprise</i>	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™

AVANTAGES CLÉS



Bacs et tiroirs à verrouillage individuel



Prise en charge de l'AMCB en temps réel



Prise en charge du remplissage de médicaments centralisé ou décentralisé



Cassettes de médicaments interchangeables



Sécurisez et Suivez les médicaments des patients



Technologie Li-Nano avec garantie de 5 ans

Fermez le circuit de distribution des médicaments entre la pharmacie et le lit du patient.

AccessRx MD™




Sécurité et visibilité des médicaments au chevet du patient

- Les tiroirs spécifiques patients à verrouillage individuel sont accessibles en scannant le code-barres du patient
- L'administration des médicaments au chevet du patient en temps réel, l'identification des patients par code-barres et l'accès direct à la prescription informatisée rationalisent le processus d'AMCB (Administration des Médicaments à Codes Barres), réduisent la redondance et augmentent la précision
- Les tiroirs des patients sont automatiquement attribués grâce à l'interface ADT (admission/décharge/transfert), ce qui élimine tout risque d'erreurs lors du fastidieux étiquetage manuel des tiroirs
- Utilise l'Active Directory de l'hôpital pour une authentification cohérente des utilisateurs
- Possibilité de personnaliser l'interface utilisateur

Rationalisez votre flux de travail

- Sécurisez et suivez les médicaments spécifiques de vos patients, jusqu'à 12 patients dans des tiroirs à verrouillage individuel, réduisant ainsi les déplacements et le temps passé à l'armoire de distribution automatisée (ADA)
- L'interface ADT et les commandes pour les patients sont transmises via le réseau sans fil au chariot pour faciliter une livraison plus rapide des médicaments
- Diminution des déplacements et du temps passé à l'armoire de distribution automatisée

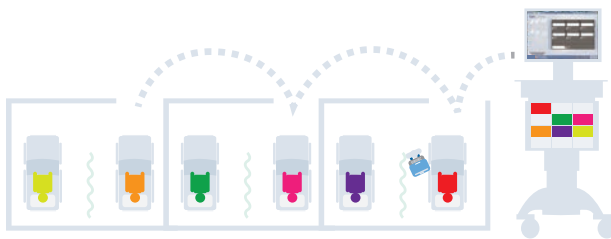



Un meilleur contrôle et plus de souplesse pour les pharmaciens grâce à la diversité des modèles de distribution des produits pharmaceutiques

- Le logiciel AccessManager™ basé sur un navigateur donne accès aux rapports tout en permettant, grâce à sa compatibilité avec l'Active Directory, de gérer les utilisateurs, de gérer la flotte et de configurer les systèmes
- Des contrôles d'accès configurables et basés sur l'heure réduisent le risque d'administration de médicaments au mauvais moment et facilitent la reconciliation en pharmacie des médicaments inutilisés
- Interface optionnelle de commandes de médicaments - Rx MD peut agir en tant que remplisseur de commandes de médicaments pour les patients et vérifier qu'une commande a été administrée
- Alertes électroniques sécurisées pour les patients transférés et sortis



Architecture logicielle, intégration évolutives et centralisées

- Multi-Org - architecture évolutive - capacité de passer d'une clinique à deux lits à un système de santé multi-établissements
- Possibilité de configurer des droits d'accès au système de santé, par exemple par service
- Rapports d'entreprise disponibles
- Déploiement multi-établissements au sein d'un réseau hospitalier
- Interface ADT conforme HL7 (données démographiques des patients) et interface RDE (commandes approuvées par la pharmacie)
- Le moteur d'interface configurable communique facilement avec le SIH
- Gestion de projet, installation et formation par l'équipe de services professionnels de TouchPoint Medical

Configurez votre système en fonction de vos besoins en médicaments et en fournitures.



Dimensions

Largeur
Hauteur
Profondeur
Volume

	Tiroirs de 102 mm (4 pouces)	Tiroirs de 152 mm (6 pouces)	Tiroirs pleine largeur pour substances contrôlées
Largeur	91,4 mm (3,6 pouces)	142,2 mm (5,6 pouces)	271,8 mm (10,7 pouces)
Hauteur	238,8 mm (9,4 pouces)	238,8 mm (9,4 pouces)	228,6 mm (9 pouces)
Profondeur	55,9 mm (2,2 pouces)	55,9 mm (2,2 pouces)	50,8 mm (2 pouces)
Volume	1213 cm ³ (74 pouces ³)	1885 cm ³ (115 pouces ³)	3195 cm ³ (195 pouces ³)

Optez pour efficacité & sécurité
avec votre système de distribution
de médicaments centralisé.

AccessRx Exchange™



Poste de travail mobile AccessRx Exchange™

- Réapprovisionnement facile là où vous en avez besoin. Peut être facilement rempli en pharmacie puis échangé ou directement rempli au chariot.
- Options de sécurité à verrouillage par clé ou verrou électronique
- Renovez facilement votre poste de travail AccessPoint™ existant sur site avec le système de cassettes interchangeable (Exchange Cassette)
- Peut être ajouté aux chariots motorisés ou non motorisés
- Fonctionne avec les chariots à hauteur ajustable manuels et électriques



Cassettes interchangeables

- Réapprovisionnement facile et direct sur le poste de travail mobile ou le support mural
- Disponible en deux, trois ou quatre niveaux et plusieurs tailles de bacs et options de tiroirs de distribution
- Capacité de charge jusqu'à 2,2 kg (5,5 lb) par niveau
- Encombrement compact pour chariot de 600 mm x 400 mm ou armoire (systèmes modulaires ISO 3394)



Chariots de transfert

- Tous les chariots de transfert comprennent une porte à tambour verrouillable
- Tous les chariots de transfert comprennent une poignée allongée
- Les options de verrouillage incluent le verrouillage par clé ou le verrouillage électronique (eLock)
- Simple largeur, option de chargement frontal
- Double largeur, option de chargement latéral



Conçu pour tenir compte de vos préférences de stockage et de votre flux de travail

- Facilitez le flux de travail et le stockage des médicaments en chambre grâce au kit de fixation murale de la cassette.
- Options de sécurité à verrouillage par clé ou verrou électronique



Adaptez facilement votre flotte AccessPoint™ existante grâce au système AccessRx Exchange

- Rénovez vos postes de travail existants sur site avec un temps d'arrêt minimal
- Peut être ajouté aux chariots motorisés ou non motorisés
- Fonctionne avec les chariots à hauteur ajustable manuels et électriques



Options de verrouillage flexibles

Caractéristiques du bouton-poussoir eLock :

- 20 codes par serrure : 19 codes d'utilisateur et un code de superviseur ; code de 4 à 8 chiffres
- 7500 cycles (longue autonomie de la batterie)
- Conforme ADA
- Témoin de batterie déchargée
- Le compartiment de batterie est facilement accessible depuis l'extérieur de la cassette

Caractéristiques du verrouillage par clé :

- Cylindre de serrure amovible
- Pour une sécurité accrue, série unique de serrure/clé pour le porte-cassette, les cassettes et le tiroir des substances contrôlées
- Serrure à volet latéral avec détrompage symétrique

Conservez et sécurisez vos médicaments
au chevet du patient.

AccessRx Secure™








Sécurisez les médicaments tout au long du flux de travail

- Tiroirs verrouillables individuellement
- Logiciel facile à utiliser
- Configurations de stockage permettant de sécuriser divers médicaments et substances contrôlées
- Tiroirs en polycarbonate fumé de 102 mm à 152 mm.
- Rangement verrouillable en aluminium et tiroirs à substances contrôlées
- Les champs d'affichage des tiroirs configurables permettent la personnalisation de l'interface utilisateur
- Ajoutez des options logicielles AccessRx MD™ aux chariots AccessRx Secure™ existants pour une solution personnalisée et évolutive




Configurez votre système pour répondre à vos besoins en médicaments et en fournitures.

Avec une large gamme de tailles et d'options de verrouillage, votre tranquillité d'esprit sera totale sachant que vos médicaments et fournitures sont stockés en toute sécurité et conformément à vos besoins.



Bacs de distribution et tiroirs : options

					
Options de verrouillage	Verrou électronique (eLock)	Verrou électronique (eLock)	Verrou à clé	Verrou électronique (eLock) ou Key Lock	Verrou électronique (eLock) ou Key Lock
Capacité	6 par niveau	4 par niveau	1 par niveau	1 sur 2 niveaux	2 sur 2 niveaux
Dimensions Largeur Hauteur Profondeur	80 mm (3,2 pouces) 75 mm (3 pouces) 338 mm (13,3 pouces)	120 mm (3,2 pouces) 75 mm (3 pouces) 338 mm (13,3 pouces)	480 mm (18,9 pouces) 75 mm (3 pouces) 338 mm (13,3 pouces)	80 mm (3,2 pouces) 75 mm (3 pouces) 338 mm (13,3 pouces)	80 mm (3,2 pouces) 75 mm (3 pouces) 338 mm (13,3 pouces)



Cassettes échangeables : options

	 2 niveaux	 3 niveaux	 4 niveaux
Options de verrouillage	Clé ou verrou électronique	Clé ou verrou électronique	Clé ou verrou électronique
Dimensions Largeur Hauteur Profondeur	595 mm (24,4 pouces) 244 mm (9,6 pouces) 395 mm (15,6 pouces)	595 mm (24,4 pouces) 393 mm (13,4 pouces) 395 mm (15,6 pouces)	595 mm (24,4 pouces) 454 mm (17,9 pouces) 395 mm (15,6 pouces)

Dimensions du chariot de transfert

	 Chariot de transfert simple largeur	 Chariot de transfert double largeur
Dimensions Largeur Hauteur Profondeur	710 mm (28 pouces) 1452 mm (57,2 pouces) 591 mm (23,3 pouces)	1020 mm (40,2 pouces) 1464 mm (57,6 pouces) 791 mm (31,1 pouces)

Accessoires pour bacs

 Kits d'étiquettes d'identification	 Kits de séparateurs
Les couvercles transparents à clipser permettent de changer rapidement et facilement les étiquettes d'identification	Les bacs peuvent accueillir jusqu'à 11 séparateurs chacun



Contactez votre représentant TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des accessoires supplémentaires spécifiques à votre application de point de service. Visitez le site touchpointmed.com/contact pour contacter votre représentant local.