



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

帮助完善药物管理。

AccessRx 系列发药推车提供了解决方案，使病人床边的药物配送和管理更安全和更有效。



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
最大药盒数	12	24	12
可配置抽屉选项	✓	✓	✓
可交换药箱		✓	
独立锁定病人抽屉	✓		✓
系统与 HIS 对接	✓		
管制药品抽屉选项	✓	✓	✓
病人药盒分配	自动	手动	手动
注入抗菌剂的推车材料	✓ MICROBAN™ PROTECTION THAT LIVES ON	✓ MICROBAN™ PROTECTION THAT LIVES ON *不包括药箱。	✓ MICROBAN™ PROTECTION THAT LIVES ON

主要优点



独立锁定药盒和抽屉



支持实时 BCMA



支持集中式
或分散式药品
补充工作流程



可交换药箱



保护并跟踪病人药品



先进的锂纳米电池技术，
提供 5 年保修


完善药房与病人床边之间的药品配送。

AccessRx MD™



床边的药物安全性和可见性

- 可通过扫描病人 **ID** 条码来访问独立锁定的病人专用抽屉
- 实时床边药品管理、条码病人识别和直接 **eMAR API** 访问可简化 **BCMA** 过程、减少冗余并提高准确性
- 使用 **ADT** (入院/出院/转床) 界面自动分配病人抽屉，省去了耗时且容易出错的手动抽屉标记过程
- 利用医院的 **Active Directory** 提供一致的用户身份验证
- 可配置抽屉显示字段允许自定义用户界面

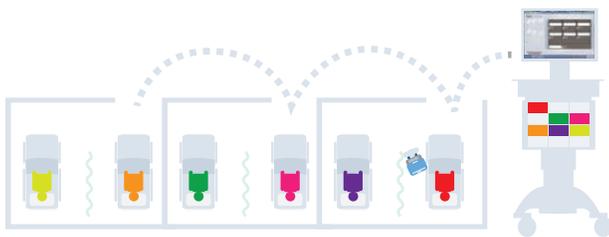

简化您的工作流程

- 在独立锁定的抽屉中保护和跟踪多达 **12** 位病人的病人特定药品，从而减少在 **ADC** 上的行程和时间
- 病人床位信息和病人医嘱通过无线网络传输到推车，能够加快药品配送速度
- 减少前往智能药柜所花费的行程和时间



跨药房分配模式，为药剂师提供更多控制和灵活性

- 基于浏览器的 **AccessManager™** 控制台提供报表访问，并允许进行 **Active Directory** 兼容的用户管理、设备管理和系统配置
- 可配置的基于时间的访问控制可降低用药时间错误的风险，并有助于药房核对未使用的药品
- 可选用药医嘱界面 — **Rx MD** 可充当病人用药医嘱的填写程序并验证是否已执行医嘱。
- 针对转床和出院的病人提供安全药房电子邮件提醒



可扩展和集中式软件架构和集成

- 多组织可扩展架构能够从两个床位的诊所扩展到多医院医疗系统
- 能够设置医疗系统访问权限，例如按科室
- 提供企业级报表
- 企业级多场所部署
- 符合 **HL7** 标准，**ADT** 接口（病人出入院床位数据）和 **RDE** 接口（病人医嘱数据）
- 可配置的接口引擎轻松与 **HIS** 通信
- **TouchPoint Medical** 专业服务团队提供项目管理、安装和培训

配置系统以满足您的药品和耗材要求。



尺寸
宽
高
深
容积

	102mm (4in) 抽屉规格	152mm (6in) 抽屉规格	管制药品 全宽抽屉规格
	91.4mm (3.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1213cm ³ (74in ³)	142.2mm (5.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1885cm ³ (115in ³)	271.8mm (10.7in) 228.6mm (9in) 50.8mm (2in) 3195cm ³ (195in ³)

通过集中式药物分配提高效率和安全性。

AccessRx Exchange™



车轮上的 AccessRx Exchange™ 工作站

- 随时随地轻松补药。可以轻松地在药房中补充，或直接在推车上交换。
- 钥匙锁或电子锁安全选项
- 使用可交换药箱系统轻松地在现场升级改造现有的 **AccessPoint™** 工作站
- 可选配电动或非电动推车
- 可搭配手动和电动升降车使用



可交换药箱

- 轻松、直接地在移动或壁挂式工作站上补药
- 提供两层、三层或四层尺寸以及多种药盒尺寸和耗材抽屉选项
- 每层额定负荷高达 **2.2kg (5.5lbs)**
- 外形尺寸小巧，适合 **600mm x400mm** 推车或（ISO 3394 模块化系统）药柜



药品转运车

- 所有药品转运车均配有锁定卷门
- 所有药品转运车都配有加长手柄
- 锁定选项包括钥匙锁或电子锁
- 单幅、前装选项
- 双幅、侧装选项



专为支持您的储存和工作流程偏好而打造

- 通过药箱壁装套件支持室内医疗站工作流程和储存。
- 钥匙锁或电子锁安全选项



使用 AccessRx Exchange™ 系统轻松适应现有的 AccessPoint™ 产品

- 只需最短的停机时间即可完成对现有工作站的升级改造
- 可选配电动或非电动推车
- 可搭配手动和电动升降车使用



灵活的锁定选项

一键式电子锁功能：

- 每把锁 **20** 个密码：**19** 个用户密码和 **1** 个管理员密码；密码长度为 **4-8** 位数字
- **7500** 次循环（长续航电池）
- 符合 **ADA** 标准
- 电池电量不足指示灯
- 电池仓可从药箱外部轻松打开

钥匙锁功能：

- 可拆卸锁芯
- 药箱载架、药箱和管制药品抽屉分别采用独特的锁/钥匙系列，以增强安全性
- 侧面卷门锁，带配对钥匙

在床边储存和保护您的药品。

AccessRx Secure™



在整个工作流程中确保药品安全

- 独立锁定抽屉
- 易于使用的软件
- 存储配置以确保各种药品和管制药品的安全
- 烟熏聚碳酸酯 4" 和 6" 抽屉
- 铝制锁存和管制药品抽屉
- 可配置抽屉显示字段允许自定义用户界面
- 可将 AccessRx MD™ 软件选配安装至现有 AccessRx Secure™ 推车，以提供可扩展的自定义解决方案

配置系统以满足您的药品和耗材要求。

提供多种尺寸和锁定选项，使药品和耗材可以根据您的要求安全地储存，让您时刻放心。

耗材药盒和抽屉选项

					
锁定选项	电子锁	电子锁	钥匙锁	电子锁 钥匙锁	电子锁 钥匙锁
容量	每层 6 个	每层 4 个	每层 1 个	每 2 层 1 个	每 2 层 2 个
尺寸 宽 高 深	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	120mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	480mm (18.9in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)

可交换药箱选项

	 2 层	 3 层	 4 层
锁定选项	钥匙或电子锁	钥匙或电子锁	钥匙或电子锁
尺寸 宽 高 深	595mm (24.4in) 244mm (9.6in) 395mm (15.6in)	595mm (24.4in) 393mm (13.4in) 395mm (15.6in)	595mm (24.4in) 454mm (17.9in) 395mm (15.6in)

药品转运车尺寸

	 单幅 药品转运车	 双幅 药品转运车
尺寸 宽 高 深	710mm (28in) 1452mm (57.2in) 591mm (23.3in)	1020mm (40.2in) 1464mm (57.6in) 791mm (31.1in)

药盒附件

	 标识标签 套件	 隔板 套件
	透明的卡装式标签封盖支持快速轻松地更换标识标签	每个药盒最多可容纳 11 个隔板

 请与您的 TouchPoint Medical 代表联系，以了解更多信息并讨论适用于您的即时护理应用的其他附件。请访问 touchpointmed.com/contact 以联系您当地的代表。