



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

幫助閉環式藥物管理。

AccessRx 系列藥品傳送車提供了更安全有效率地運送及管理藥品到病人床邊的解決方案。



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
最多藥盒數量	12	24	12
抽屜可配置	✓	✓	✓
交換式藥箱		✓	
獨立鎖定病人抽屜	✓		✓
軟體與 HIS 整合	✓		
管制藥物抽屜選項	✓	✓	✓
病人藥盒分配	自動	手動	手動
車體內含抗菌成份	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™ *不包括藥箱	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™

主要優勢



獨立鎖定藥盒和抽屜



支援即時 BCMA



支持集中式
或分散式藥品
補充工作流程



交換式藥箱



保護並跟蹤病人藥品



先進的 Li-Nano 電池技術，
提供 5 年保固

藥局與病人床邊之間的閉環式藥品運送。

AccessRx MD™




床邊的藥物安全性和可見性

- 可透過掃描病人 ID 條碼來操作獨立鎖定的病人專用抽屜
- 即時床邊藥品管理、條碼病人識別和直接 eMAR API 存取可簡化 BCMA 過程、減少備援並提高準確性
- 使用 ADT (住院/出院/轉院) 介面自動分配病人抽屜，省去了耗時且容易出錯的手動抽屜標記過程
- 利用醫院的 Active Directory 提供一致的使用者權限
- 可設定抽屜顯示欄位允許自訂使用者介面

簡化您的工作流程

- 在獨立鎖定的抽屜中保護和跟蹤多達 12 位病人的病人特定藥品，從而減少在 ADC 上的行程和時間
- ADT 和病人處方透過無線網路傳輸到推車，能夠加快藥品傳送速度
- 減少前往自動調配藥櫃所花費的行程和時間

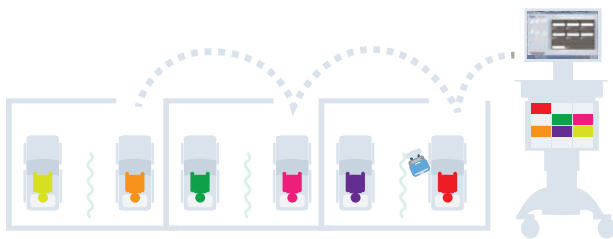



跨藥局分配模式，為藥師提供更多管控和靈活性

- 基於瀏覽器的 AccessManager™ 控制台提供報告存取，並允許進行 Active Directory 相容的使用者管理、設備管理和系統設定
- 可配置基於時間的存取控制來降低用藥時間錯誤的風險，並有助於藥局核對未使用的藥品
- 選配的藥物處方介面 — Rx MD 可充當病人藥物處方的填寫程式並驗證是否已執行處方。
- 提供藥局轉院及出院病人的電子郵件提醒



可擴展和集中式軟體架構與整合

- 多組織可擴展架構能夠從兩個床位的診所擴展到多醫院衛生系統
- 可依部門設定衛生系統存取權限
- 提供企業報告
- 企業多場所部署
- 符合 HL7 標準，ADT 介面（病人人口統計資料）和 RDE 介面（藥局批准的處方）
- 可配置的介面易與 HIS 整合
- TouchPoint Medical 專業服務團隊提供專案管理、安裝和培訓

可配置系統以符合您的藥品與耗材之需求。



尺寸
寬
高
深
容積

102mm (4in) 抽屜規格	152mm (6in) 抽屜規格	管制藥物 全寬抽屜規格
91.4mm (3.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1213cm ³ (74in ³)	142.2mm (5.6in) 238.8mm (9.4in) 55.9mm (2.2in) 1885cm ³ (115in ³)	271.8mm (10.7in) 228.6mm (9in) 50.8mm (2in) 3195cm ³ (195in ³)

透過集中式藥物分配提高效率 and 安全性。

AccessRx Exchange™



AccessRx Exchange™ 移動工作站

- 隨時隨地輕鬆補貨。可以輕鬆地在藥局中補充，或直接在推車上交換。
- 鑰匙鎖或電子鎖安全選項
- 將現有的 AccessPoint™ 工作站輕鬆升級可交換藥箱系統
- 可增加至有電池或無電池工作站
- 可搭配手動和電動升降車使用



可交換藥箱

- 輕鬆、直接地在移動或壁掛式工作站上補貨
- 提供兩層、三層或四層尺寸以及多種藥盒尺寸和耗材抽屜選項
- 每層承重承重高達 2.2kg (5.5lbs)
- 小巧外形尺寸，適合 600mm x 400mm 車體或 (ISO 3394 模組化系統) 藥櫃



傳送藥車

- 所有傳送藥車均配有鎖定卷門
- 所有傳送藥車都配有延伸把手
- 鎖控選項包括鑰匙鎖或電子鎖
- 單車體寬度、前裝選項
- 雙車體寬度、側裝選項



專為支援您的儲存和工作流程偏好而打造

- 透過藥箱壁掛套件支持室內醫療站工作流程和儲存
- 鑰匙鎖或電子鎖安全選項



使用 AccessRx Exchange™ 系統輕鬆適應現有的 AccessPoint™ 產品

- 只需最短的停機時間即可完成對現有工作站的升級改造
- 可增加至有電池或無電池工作站
- 可搭配手動和電動升降車使用

靈活的鎖定選項

按鈕式電子鎖功能：

- 每把鎖 20 個密碼：19 個使用者密碼和 1 個管理員密碼；密碼長度為 4-8 位數字
- 7500 次循環（最長電池壽命）
- 符合 ADA 標準
- 電池電量不足指示燈
- 可從藥箱外輕鬆接觸電池置放處

鑰匙鎖功能：

- 可拆卸鎖芯
- 藥箱套件、藥箱和管制藥物抽屜分別採用獨特的鎖/鑰匙系列，以增強安全性
- 側面卷門鎖，對稱式鑰匙設計



儲存並保護您的藥品至床邊。

AccessRx Secure™








在整個工作流程中確保藥品安全

- 獨立鎖定抽屜
- 易於使用的軟體
- 可配置儲存設定以確保各種藥品和管制藥物的安全
- 強化聚合物 4” 和 6” 抽屜
- 鉛制鎖控和管制藥物抽屜
- 可設定抽屜顯示欄位允許自訂使用者介面
- 將 AccessRx MD™ 軟體選項增加至現有 AccessRx Secure™ 推車，以提供可擴展的自訂解決方案




可配置系統以符合您的藥品與耗材之需求。

提供多種尺寸和鎖定選項，使藥品和耗材可以根據您的要求安全地儲存，讓您時時刻刻都放心。

耗材藥盒和抽屜選項

					
鎖定選項	電子鎖	電子鎖	鑰匙鎖	電子鎖或鑰匙鎖	電子鎖或鑰匙鎖
容量	每層 6 個	每層 4 個	每層 1 個	每 2 層 1 個	每 2 層 2 個
尺寸 寬 高 深	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	120mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	480mm (18.9in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)	80mm (3.2in) 75mm (3in) 338mm (13.3in)


可交換藥箱選項

	 2 層	 3 層	 4 層
鎖定選項	鑰匙或電子鎖	鑰匙或電子鎖	鑰匙或電子鎖
尺寸 寬 高 深	595mm (24.4in) 244mm (9.6in) 395mm (15.6in)	595mm (24.4in) 393mm (13.4in) 395mm (15.6in)	595mm (24.4in) 454mm (17.9in) 395mm (15.6in)

傳送藥車尺寸

	 單車體 傳送藥車	 雙車體 傳送藥車
尺寸 寬 高 深	710mm (28in) 1452mm (57.2in) 591mm (23.3in)	1020mm (40.2in) 1464mm (57.6in) 791mm (31.1in)

藥盒配件

	 標識標籤 套件	 隔板 套件
	透明的卡裝式標籤封蓋支持快速輕鬆地更換標識標籤	每個藥盒最多可容納 11 個隔板

 請與您的 TouchPoint Medical 代表聯絡，以瞭解更多資訊並討論適用於您的定點照護應用的其他配件。請造訪 touchpointmed.com/contact 聯絡您當地的代表。